

ENSEMBLE COMPLET iProphy



MODÈLE : **Set complet**

RÉF : **Y1500015**

Contenu :

- Pièce à main moteur iProphy
- Tête iFX57
- Socle de recharge iProphy
- Adaptateur secteur
- Embout de Type F

iProphy sans tête

MODÈLE : **iProphy W/O**

RÉF : **Y1500069**

Contenu :

- Pièce à main moteur iProphy
- Socle de recharge iProphy
- Adaptateur secteur
- Embout de Type F

TÊTES POUR iProphy



MODÈLE : **iFX57**

RÉF : **C1102**

- Pour prophy
- Pour cupules à visser
- Réducteur 4:1



MODÈLE : **PR-F**

RÉF : **H209**

- Pour tête de contre-angle à usage unique
- Réducteur 4:1



PIÈCES DÉTACHÉES

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Pièce à main moteur iProphy		EA11170020
Socle de recharge iProphy		UA10910020
Adaptateur secteur		Y1500014
Pack batterie		E1080052
Embout de Type F		Z256090

Lavables en thermodésinfecteur

Stérilisation en autoclave

NSK



iProphy

PIÈCE À MAIN DE POLISSAGE SANS FIL

Reprenez le contrôle

Sans pédale et sans fil, le iProphy NSK vous offre une liberté de mouvements, une stabilité maximale et une maîtrise totale pour un polissage tout en douceur. Optimisez votre pratique clinique en améliorant vos performances jours après jours.


Un dispositif sans fil, pour une utilisation facile

L'absence de fil élimine les restrictions liées à certaines postures imposées lors des traitements. Une liberté totale pour l'utilisateur, quel que soit l'environnement et la position de traitement.



Une tête ultra réduite pour un champ de vision dégagé

La tête ultra réduite, longue et fine, garantit un large champ de vision dans la cavité buccale. Et permet de réaliser des traitements plus doux et plus précis.

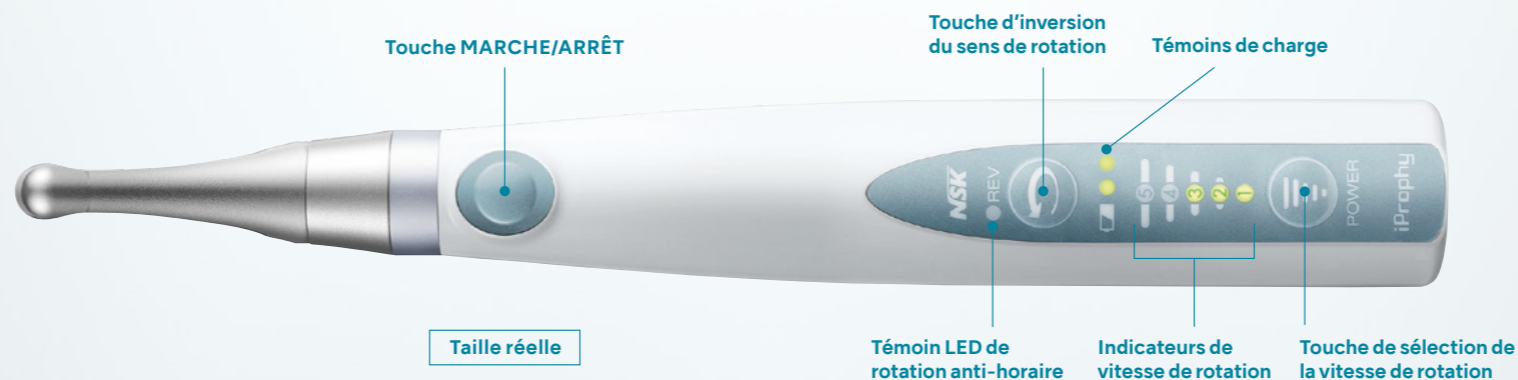

Puissance facile à contrôler

Un contrôle de puissance du bout des doigts. Pas de commande au pied requise. iProphy maintient facilement une vitesse de rotation basse, plus difficile à obtenir avec les contre-angles standards.



Léger et facile à tenir en main

Sa conception ergonomique intègre les dernières technologies de pointe. Légère, facile à tenir en main et bien équilibrée, cette pièce à main est agréable à manier même si vous l'utilisez pour des traitements de polissage relativement longs.



Changement de tête facile

Changement de tête facile grâce au système de fixation rapide. La tête peut être positionnée selon six angles différents afin de s'adapter parfaitement à toutes les positions d'intervention.



Une interface utilisateur simple

Le bouton MARCHE/ARRÊT est de grande taille et facile à activer.



Large plage de réglages de la vitesse

En changeant de tête, il est possible de définir une large plage de vitesses, allant de 500 à 2 500 tr/min. Cette pièce à main peut être utilisée pour un large éventail d'interventions.